


# Extrudeur lipidique haute pression

Lipidique | Lipopolyplex | Filtration stérile | Expérimental | Moyen | Productif

## Particularités

Genizer extrudeur lipidique est principalement utilisé dans l'homogénéisation de la taille des particules dans les produits pharmaceutiques, l'enlèvement des particules et des précipitations dans les produits, la réduction de la taille des particules de lipides et d'émulsions pour faciliter la filtration stérile, la recherche en biodynamie moléculaire. En générant une certaine pression à l'extrémité de puissance, l'échantillon extrudé est produit à plusieurs reprises avec un corps lipidique plus petit de 50nm-120nm avec une ouverture spécifiée par un film en polycarbonate.

- **Sanitaire :** 316L acier inoxydable
- **Compatibilité:** Connexion rapide, TNP, UNF, brides et accessoires personnalisés.
- **Efficacité:** Soutien de trou de micron pour maximiser la pression et réduire la pollution.
- **Se conformer aux normes GMP et FDA**

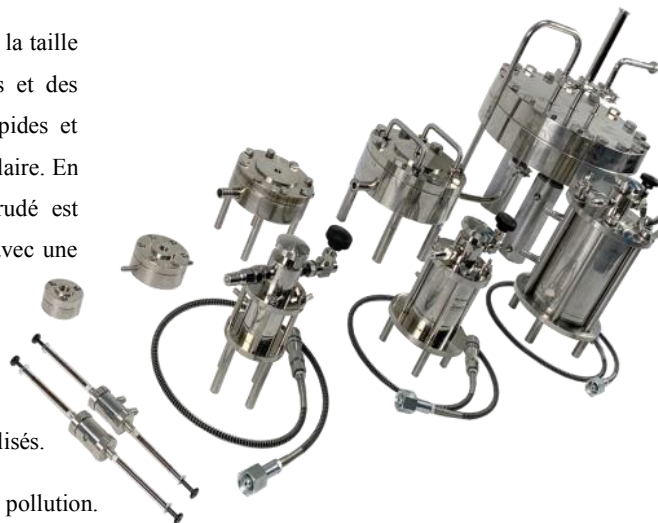

Modèle de spécification	Numéro de produit	Pression maximale	Extrémité de puissance	Taille L×W×H(cm)/Poids
Expérimental 1-200mL	HandExtruder-1mL-RT	150 psi	Manuel	23×17×13/2kg
	HandExtruder-1mL	150psi	Manuel	23×17×13/2kg
	Jacketed Extruder-10mL	3,000 psi	Air comprimé	23×13×25/4kg
	Online Extruder-25mL	6,000 psi	<a href="#">Pompe-25mL/min</a>	10×10×8/1kg
	Jacketed Extruder-100mL	3,000 psi	Air comprimé	23×20×32/7kg
Moyen 100-8000mL	GExtruder-200mL	6,000 psi	<a href="#">Pompe-50mL/min</a>	12.5×12.5×9/2kg
	Jacketed Extruder-800mL	3,000 psi	Air comprimé	25×25×37/20kg
	Online Extruder-1L	6,000 psi	<a href="#">Pompe-10L/hr</a>	18×18×10/5kg
	Jacketed Extruder-3000mL	3,000 psi	Air comprimé	30×25×55/45kg
Productif 2-20L 20L-100L	Online Extruder-8L	6,000 psi	<a href="#">Pompe-30L/hr</a>	30×25×25/25kg
	Jacketed Extruder-10000mL	3,000 psi	Air comprimé	45×40×65/120kg
	Online Extruder-20L	6,000 psi	<a href="#">Pompe-60L/hr</a>	45×40×30/90kg
	Multi-Extruders System	6,000 psi	<a href="#">Pompe-80L/hr</a>	Attendu



Phone: +1(323) 825-1851  
Fax : +1(323) 978-4693  
Email: Nano@Genizer.com  
<http://www.genizer.com>

Discount available for public research. Genizer.com reserves the right to change specifications without notice. © 2009 by Genizer. All rights reserved. French Version 091620.

# Extrudeur lipidique haute pression



Extrudeur manuel




Extrudeur pneumatique



Extrudeur en ligne



Homogénéisateur avec extrudeur

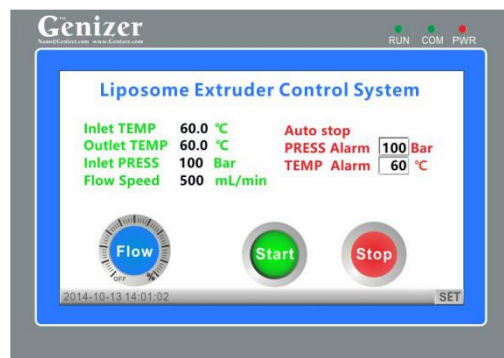

Système de contrôle de pompe haute pression pour l'extrudeur lipidique

## Configuration standard

Surface	Électropolishée et passivation interne
Application	Lipidique, Lipopolyplex, Filtration stérile, Expérimental, Moyen, Productif
Type d'importation	1/2" , 1" Connexion rapide ou Connexion haute pression
Type d'exportation	1/2" , 1" Connexion rapide ou Connexion haute pression
Importation	316 Tasse en acier inoxydable ou En ligne
Exportation	316 Tasse en acier inoxydable ou En ligne
Matériel de produit	316L Acier inoxydable
Normes matérielles	Qualité pharmaceutique, approbation de FDA et de GMP
Période de garantie	Tout défaut de fabrication dans un délai d'un an

## Optionnel

Accessoires	Connexion rapide, TNP, UNF, brides et accessoires personnalisés
Personnalisation du client	La demande des clients pour un trafic plus important
Détecteur	Manomètre, capteur de pression et de température
Type d'exportation	NPT, UNF, brides et accessoires personnalisés
Importation et exportation	Corps de seringue de 100mL, 200mL, 500mL, 1L, 2L ou En ligne
Matériel de produit	Titane (résistant aux acides et aux alcalis)